



Máy xét nghiệm sinh hoá tự động


KENZA 450 TX



www.biolabo.fr



KENZA 450 TX

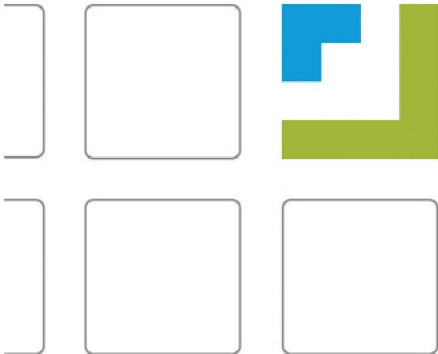

Nhỏ gọn và tốc độ

Tiêu chuẩn máy xét nghiệm sinh hoá của bạn

Automated biochemistry analyser KENZA 450 TX



- Công suất lên tới 420 tests/giờ
- Tùy chọn module ISE : Na, K, Cl, Li (+480 tests/giờ)
- Truy cập ngẫu nhiên
- 120 vị trí hoá chất
- 98 vị trí mẫu, chuẩn, QC
- Tự động rửa cuvettes
- 2 trạm rửa kim tự động liên tục
- Có chức năng Stat
- 2 cánh tay robot, 3 xy-lanh

Highest Flexibility

- Thời gian cho kết quả đầu tiên chỉ 2 phút 20s
- Thêm mẫu bệnh nhân, hoá chất liên tục
- Thêm mẫu cấp cứu ngay lập tức
- Mở bất cứ lúc nào, hệ thống tự động dừng hoạt động khi mở
- Tiêu thụ nước thấp (< 3 L/giờ sử dụng tối đa)
- Không cần thời gian khởi động và tạm nghỉ
- Luôn sẵn sàng làm việc

KENZA 450 TX

BIOLABO
Diagnostics 

Hoá chất

- 2 khay hoá chất
- 60 vị trí hoá chất 1
- 60 vị trí hoá chất 2/3
- Phù hợp bình hoá chất to, vừa, nhỏ hoặc thể tích cực nhỏ
- Có hệ thống làm lạnh khay hoá chất
- Cảm biến mức hoá chất
- Cảm biến va chạm
- Rửa kim hoá chất liên tục

Mẫu


- 80 vị trí mẫu
- 10 vị trí QC, 8 vị trí chuẩn
- Kim hút hoạt động dựa trên 2 xy-lanh Hamilton chính xác
- Cảm biến mức mẫu
- Cảm biến va chạm
- Rửa kim hút mẫu liên tục

Phần mềm

- Giao diện sử dụng thân thiện, công thái học
- Tùy chỉnh cho sử dụng điều khiển chạm
- Phương pháp: endpoint, kinetic, fixed time, differential, sample blank, multistandard, Bichromatism, immunoturbidimetry
- Levey-Jenning controls chart
- Quy tắc Wesgard được tự động kiểm tra
- Quản lý tính tương thích giữa các hoá chất
- Tự động tính toán
- Thống kê test hàng ngày
- Hỗ trợ mạng LIS

Hệ thống quang

- Đèn halogen có tuổi thọ cao
- 9 bước sóng: 340-380-405-450-505-546-570-620-700
- Đọc đồng thời 9 bước sóng
- Optical path: 6 mm
- 50 cuvettes tuổi thọ cao
- Các trạm vệ sinh có hiệu quả cao (3 cặp kim + 2 kim đơn)
- Rửa với nước và hoá chất rửa đặc biệt
- Tiêu thụ lượng nước thấp < 3 L/giờ sử dụng tối đa
- 250 lần đọc mỗi 15 giây
- Công nghệ dây dẫn quang

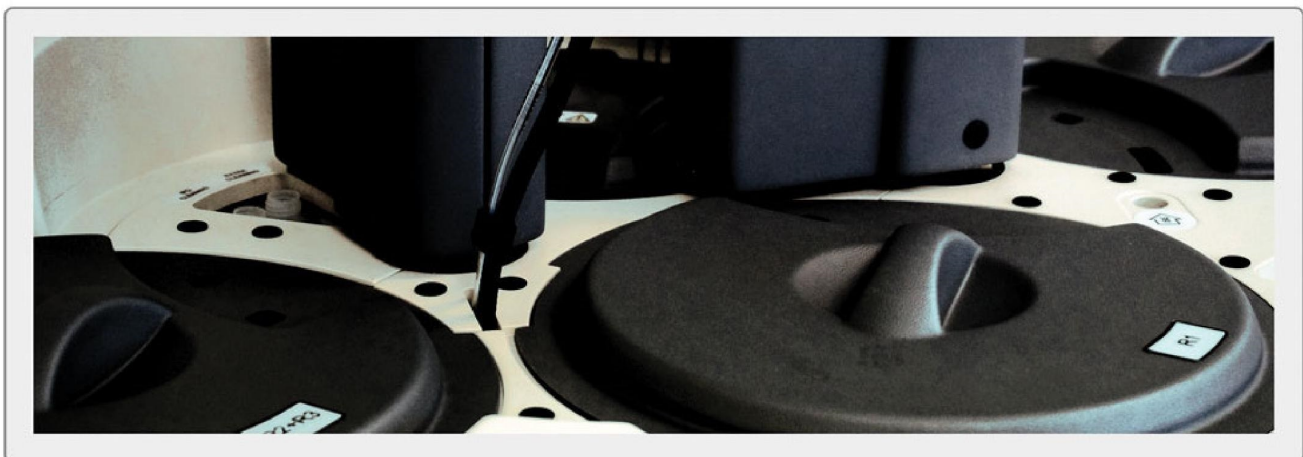

Định danh

- Tích hợp barcode reader cho mẫu bệnh nhân
- Tích hợp barcode reader cho hoá chất
- 2D barcode reader tự động nhận giá trị chuẩn và QC

2 cánh tay robot, bao gồm

- Bao gồm kim
- Cảm biến mức (hoá chất và mẫu bệnh)
- Tiền ủ âm hoá chất
- Cảm biến va chạm
- Trạm vệ sinh





Thông số chung

- Kích thước Net: 100 cm (W), 65 cm (D), 55 cm (H), Trọng lượng Net: 60 kg
- Kích thước Cross: 129 cm (W), 90 cm (D), 92 cm (H), Trọng lượng Gross: 95 kg

Dịch vụ kỹ thuật

Chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn.
Nếu muốn biết thêm chi tiết hãy liên lạc với chúng tôi

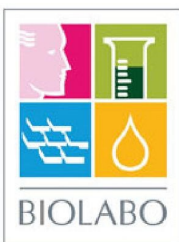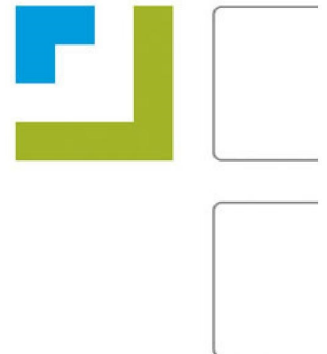

Les Hautes Rives
02160 MAIZY
France

Tél. + 33 (0)323 251 550
Fax + 33 (0)323 256 256

AKENZA 450 TX

BIOLABO
Diagnostics 



sales@biolabo.fr



support@biolabo.fr

Distributor:

version: 22 / 01 / 2019

www.biolabo.fr